

Küschall® Champion



ES **Silla de ruedas activa**
Manual del usuario



Este manual debe ser entregado al usuario final.
ANTES de usar este producto lea este manual y guárdelo para futuras referencias.

 **küschall®**
designed for life

©2013 Küschall AG

All rights reserved. Republication, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Küschall AG. Trademarks are identified by [™]and [®]. All trademarks are owned by or licensed to Küschall AG or its subsidiaries unless otherwise noted.

Contenido

1	Generalidades	5
1.1	Información el manual del usuario	5
1.2	Explicación de símbolos.	5
1.3	Garantía	5
1.4	Uso debido	6
1.5	Vida útil	6
1.6	Protección de la propiedad intelectual	6
2	Seguridad	7
2.1	Indicaciones de seguridad	7
2.2	Dispositivos de seguridad	7
3	Estructura y funcionamiento	9
3.1	Vista global	9
3.2	Frenos de estacionamiento	10
3.3	Respaldo	11
3.4	Barra estabilizadora para el respaldo (opcional)	11
3.5	Empuñaduras	12
3.6	Reposabrazos con regulación continua en altura (opcional)	13
3.7	Dispositivo antivuelco	13
3.8	Cojín de asiento	14
4	Accesorios	15
4.1	Cinta de fijación	15
4.2	Cinturón pélvico	15
4.3	Bomba de inflar	16
4.4	Bolsa de transporte para la silla de ruedas (opcional)	16
4.5	Iluminación pasiva	16
4.6	Ruedas transit	16

4.7	Pisapié	17
4.8	Soporte para bastones.	17
5	Instalación	18
5.1	Indicaciones de seguridad	18
6	Conducción de la silla de ruedas	19
6.1	Indicaciones de seguridad	19
6.2	Frenado durante la marcha	19
6.3	Subida y bajada de la silla de ruedas.	20
6.4	Impulsión y conducción de la silla de ruedas.	21
6.5	Desplazamiento con escalones y descansillos	22
6.6	Bajar escaleras.	24
6.7	Conducción sobre rampas y pendientes	24
6.8	Estabilidad y equilibrio al estar sentado	25
7	Transporte	27
7.1	Indicaciones de seguridad	27
7.2	Plegar y desplegar la silla de ruedas	27
7.3	Montaje y desmontaje de las ruedas traseras	28
8	Mantenimiento	30
8.1	Indicaciones de seguridad	30
8.2	Plan de mantenimiento	30
8.3	Cuidado	32
8.4	Desinfección	32
9	Solución de problemas.	33
9.1	Indicaciones de seguridad	33
9.2	Detección y reparación de defectos	34
10	Después del uso	36
10.1	Reutilización	36
10.2	Eliminación de desechos	36
11	Datos técnicos	37
11.1	Dimensiones y peso.	37

11.2	Condiciones ambientales.	38
11.3	Neumáticos.	38
11.4	Placa de identificación.	38

1 Generalidades

1.1 Información el manual del usuario

Le agradecemos su decisión de adquirir una silla de ruedas *küschall*®.

Este manual del usuario aporta indicaciones importantes sobre el uso de la misma. Para conducirla de modo seguro, lea atentamente el manual del usuario en su totalidad y tenga en cuenta las indicaciones de seguridad.

Si tiene problemas de vista, puede consultar el manual del usuario (en formato PDF) que se encuentra en Internet en www.kueschall.com y aumentar su tamaño tanto como sea necesario para verlo en pantalla. Si no puede aumentar lo suficiente el tamaño de los textos y de los gráficos, póngase en contacto con el distribuidor de *küschall*® de su país; → direcciones en el dorso de este documento. En caso de ser necesario, le proporcionaremos un fichero PDF de alta resolución con el manual del usuario. Además, puede utilizar programas de ordenador adecuados provistos de funciones de lenguaje especiales (por ejemplo, Adobe®Reader®X: Shift+Ctrl+Y) para leer el fichero PDF en voz alta.



El equipamiento real de su silla de ruedas puede diferir de las explicaciones y representaciones aquí descritas debido a la diversidad de variantes.

Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.kueschall.com.

1.2 Explicación de símbolos

Símbolos en este manual

Las advertencias se identifican mediante símbolos en este manual del usuario. Las indicaciones van precedidas de textos de señalización que expresan la magnitud del peligro.



ADVERTENCIA

Indica una posible situación peligrosa que, de no ser evitada, puede provocar lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica una posible situación peligrosa que, de no ser evitada, puede provocar lesiones leves o moderadas.



IMPORTANTE

Indica una posible situación peligrosa que, de no ser evitada, puede provocar daños materiales.



Pone de relieve consejos y recomendaciones útiles, así como información para el uso eficiente y sin averías.



Este producto cumple con la Directiva 93/42/CEE en lo concerniente a dispositivos médicos. La fecha de lanzamiento de este producto figura en la declaración de conformidad CE.

1.3 Garantía

Küschall AG garantiza el perfecto estado y funcionamiento de su silla de ruedas. La garantía cubre todas las averías y defectos que de forma probada proceden de una fabricación incorrecta, mala calidad de los materiales o modelo defectuoso. Los derechos de garantía frente a Küschall AG sólo pueden ser reclamados por el distribuidor, y no por el usuario de la silla de ruedas.

Esta garantía no cubre las consecuencias del desgaste normal, de un uso incorrecto o daños, así como la falta de mantenimiento, el montaje o puesta en marcha defectuosos por parte del comprador o de terceros, o problemas que son consecuencia de circunstancias externas. Las piezas de cierre quedan excluidas de la garantía. La obligación de garantía se cancela cuando en la silla de ruedas se han realizado modificaciones no previstas y no ejecutadas por el distribuidor especializado, así como por

el empleo de recambios inapropiados. La garantía de Küschall AG no incluye los gastos que surgen como consecuencia de la subsanación del problema, por ejemplo los fletes o transporte, costes salariales, gastos de viaje, etc.

El plazo de validez de la garantía es de 24 meses. La estructura tiene una garantía de hasta 5 años.

Además, las condiciones forman parte de las condiciones generales de cada país donde se vende el producto.

Calidad y resistencia al fuego

La calidad es fundamental para el funcionamiento de la empresa, conforme a las normativas ISO 9001 e ISO 13485.

La silla de ruedas se ha comprobado según la norma EN 12183. Entre las evaluaciones se incluye una prueba de inflamabilidad.

1.4 Uso debido

La silla de ruedas activa se acciona manualmente y sirve exclusivamente para el movimiento autónomo o con acompañante de una persona con impedimentos para caminar. Solamente las personas física y mentalmente capaces pueden utilizar de forma segura el dispositivo sin la ayuda de un asistente (por ejemplo accionarla, dirigirla y frenarla). La silla de ruedas debe utilizarse exclusivamente sobre suelos lisos, en terrenos no dificultosos o en espacios interiores. Esta silla de ruedas activa debe adaptarse y ajustarse a su estado de salud concreto.



¡ADVERTENCIA!

Todo uso distinto del previsto o utilización inadecuada de la silla de ruedas puede provocar situaciones peligrosas.

1.5 Vida útil

La vida útil prevista es de cinco años, siempre y cuando el producto se utilice diariamente y conforme a las instrucciones de seguridad y las

instrucciones de mantenimiento, y se respete el uso previsto, tal y como se indica en el presente manual.

1.6 Protección de la propiedad intelectual

Este manual del usuario está protegido por derechos de propiedad intelectual. Su reimpresión, reproducción o transmisión a terceros, ya sea total o parcial, no se permite sin el consentimiento previo por escrito del fabricante.

2 Seguridad

2.1 Indicaciones de seguridad

Este apartado contiene aspectos de seguridad importantes para la protección óptima del conductor de la silla de ruedas y del acompañante, así como para el uso seguro y sin averías de la silla de ruedas.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de accidentes y de lesiones graves

Pueden producirse accidentes con lesiones graves si la silla de ruedas no se ajusta correctamente.

- Solamente un distribuidor autorizado puede realizar los ajustes de la silla de ruedas.



¡ADVERTENCIA!

Peligro por modo de conducción inadecuado

Sobre superficies mojadas, suelos con grava y en terrenos irregulares existe el peligro de resbalar.

- Adapte siempre su velocidad y comportamiento de marcha a las circunstancias (tiempo, superficie, capacidad individual,...).



¡ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones

En caso de colisión puede sufrir heridas en partes del cuerpo que sobresalen de la silla de ruedas (p. ej. los pies o las manos).

- Evite toda colisión sin freno.
- No conduzca nunca en dirección frontal hacia un objeto.
- Conduzca con cuidado por los pasos estrechos.



¡ADVERTENCIA!

Peligro por marcha incontrolada

A velocidades altas, puede perder el control de su silla de ruedas y caer.

- No rebase nunca una velocidad de 7 km/h.
- Evite las colisiones en general.



¡PRECAUCIÓN!

Peligro de quemaduras

Los componentes de la silla de ruedas pueden calentarse si se exponen a una fuerte radiación solar.



¡PRECAUCIÓN!

Peligro de atrapamiento

Existe el riesgo de que sus dedos o brazos queden atrapados entre las partes móviles de la silla de ruedas.

- Al accionar los mecanismos de plegado o inserción de las piezas en movimiento, como el eje extraíble de la rueda trasera, o bien al plegar el respaldo o el dispositivo antivuelco, existe riesgo de atrapamiento.

2.2 Dispositivos de seguridad



¡ADVERTENCIA!

Peligro de accidente

Unos dispositivos de seguridad (frenos, dispositivos antivuelco) incorrectamente ajustados o que no funcionen pueden provocar accidentes.


- Antes de cada uso de la silla de ruedas, compruebe el funcionamiento de los dispositivos de seguridad y encargue su control periódicamente a un distribuidor especializado.

Champion

Las funciones de los dispositivos de seguridad se describen en el capítulo 3 Estructura y funcionamiento, página 9.

3 Estructura y funcionamiento

3.1 Vista global

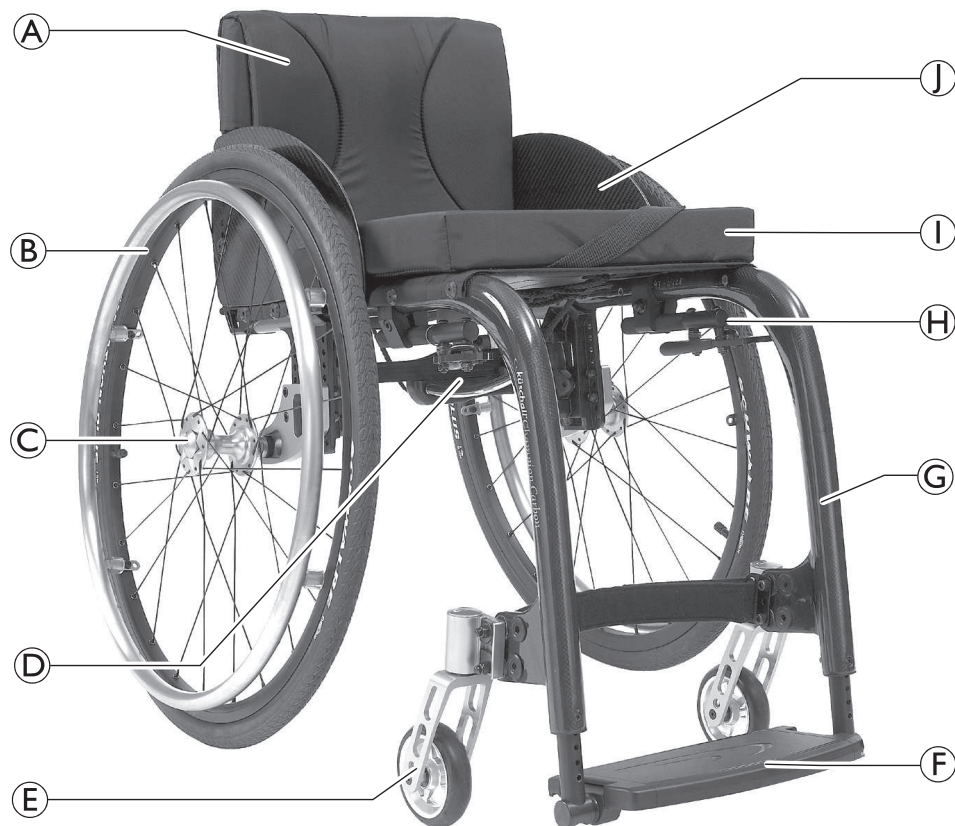

Ⓐ	Respaldo
Ⓑ	Ruedas traseras con aro de propulsión
Ⓒ	Eje de desmontaje rápido
Ⓓ	Mecanismo para plegar
Ⓔ	Horquilla de la rueda delantera con rueda
Ⓕ	Reposapiés abatibles
Ⓖ	Chasis
Ⓗ	Freno de estacionamiento
Ⓘ	Cojín de asiento
Ⓙ	Protector de ropa

Breve descripción

La *küschall Champion* es una silla de ruedas activa plegable.

i El equipamiento real de su silla de ruedas puede diferir del aquí presentado, ya que cada silla de ruedas se confecciona de forma especial según los datos del pedido.

3.2 Frenos de estacionamiento

Los frenos de estacionamiento sirven exclusivamente para fijar la silla de ruedas en un lugar y evitar el desplazamiento involuntario.



¡ADVERTENCIA!

Peligro de caída por frenado brusco

Si acciona los frenos de estacionamiento durante la marcha, no se podrá controlar el sentido de la marcha y la silla de ruedas puede frenar de forma brusca, lo que puede provocar choques o caídas.

- No accione nunca los frenos de estacionamiento durante la marcha.




¡ADVERTENCIA!

Peligro de caída

El funcionamiento de los frenos de estacionamiento sólo se garantiza si los neumáticos tienen aire suficiente.


- Asegúrese de dar a los neumáticos la presión correcta, 11.3 Neumáticos, página 38.

Freno de empuje estándar

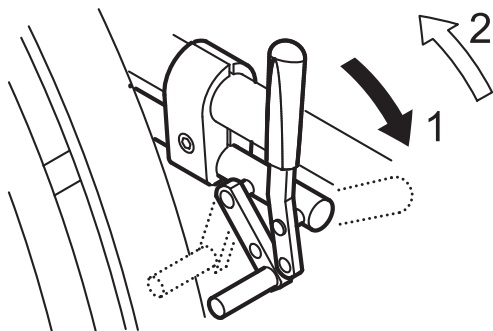


1. Para accionar el freno, presione la palanca de freno hacia delante hasta que haga tope.
2. Para soltar el freno, tire de la palanca de freno hacia atrás.

Freno de tiro

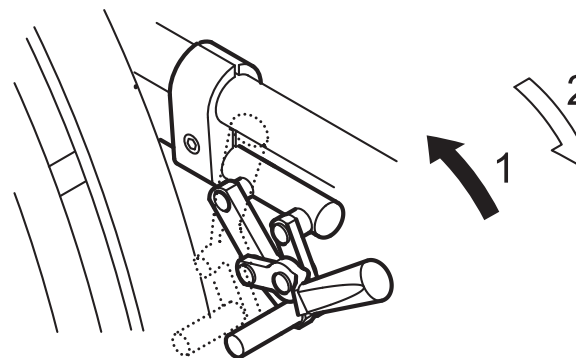


1. Para accionar el freno, tire la palanca de freno hacia atrás hasta el tope.
2. Para soltar el freno, tire de la palanca de freno hacia delante.

Freno Performance

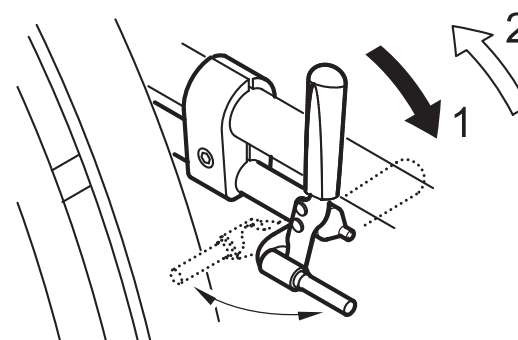

1. Para accionar el freno, presione la palanca de freno hacia delante hasta que haga tope.
2. Para soltar el freno, tire de la palanca de freno hacia atrás.

Freno activo

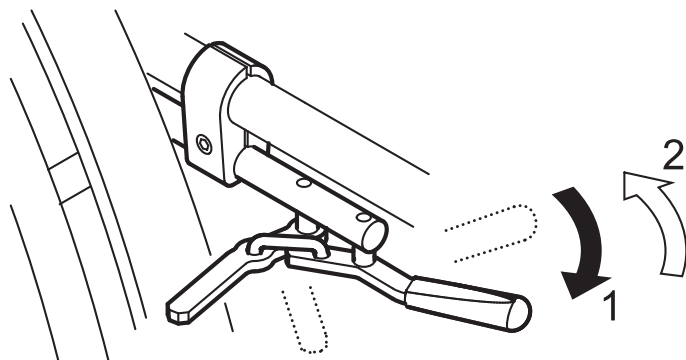


1. Para accionar el freno, tire hacia delante de la palanca de freno ubicada junto a las rodillas o entre ellas hasta que haga tope.
2. Para soltar el freno, tire hacia atrás la palanca de freno ubicada junto a las rodillas o entre ellas.

3.3 Respaldo

Funda del respaldo

La tensión de la funda del respaldo se puede adaptar a sus necesidades.

Adaptación de la funda del respaldo

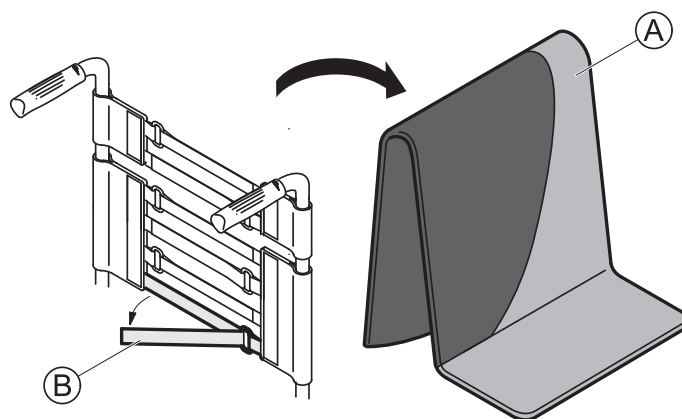

1. Retire el acolchado del respaldo (A).
2. Suelte las cintas de velcro (B) de la parte trasera de la funda del respaldo tirando de ellas levemente.
3. Apriete las cintas con más o menos fuerza según sea necesario y a continuación vuelva a sujetarlas.



¡ADVERTENCIA!

Peligro de vuelco

Si las cinchas están demasiado flojas, la silla puede volcar con más facilidad.

- Asegúrese de que las bandas están colocadas correctamente.



¡IMPORTANTE!

- No tire demasiado fuerte de las cinchas para evitar que cambie la geometría de la silla de ruedas.



¡IMPORTANTE!

- Tire de las cinchas únicamente con la silla desplegada.

3.4 Barra estabilizadora para el respaldo (opcional)


En caso de grandes alturas o anchuras del respaldo, existe una barra estabilizadora que fija el respaldo.



¡IMPORTANTE!

- No levante ni desplace la silla de ruedas sujetándola por la barra estabilizadora. Podría romperse.
- Antes de plegar la silla de ruedas, debe desbloquear la barra estabilizadora.

Desbloqueo de la barra estabilizadora

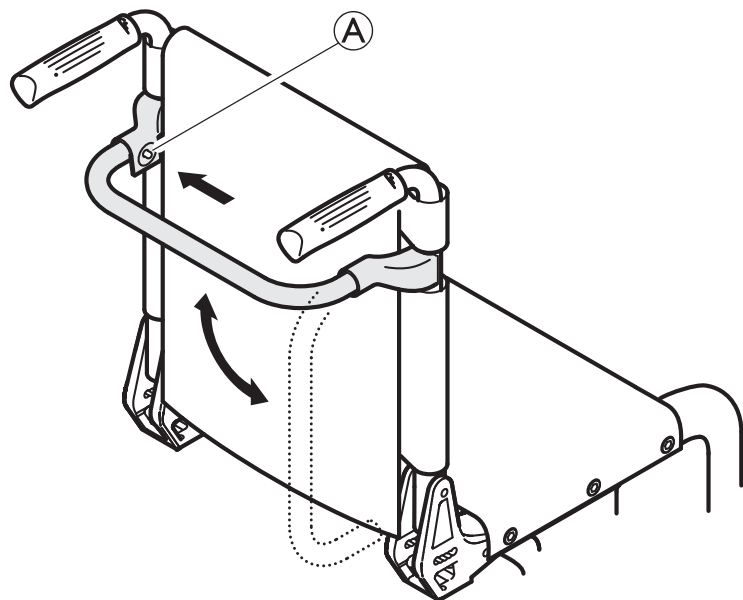

1. Oprima el pasador elástico A en la fijación del lado izquierdo e incline la barra estabilizadora hacia abajo.

La barra estabilizadora también puede extraerse completamente oprimiendo los dos pasadores elásticos situados a ambos lados. Entonces podrá extraer la barra estabilizadora.

3.5 Empuñaduras




¡IMPORTANTE!

- Antes de cada uso compruebe que las empuñaduras están bien sujetas y que no pueden girarse ni extraerse.

Empuñaduras abatibles (opcional)

Las empuñaduras abatibles se utilizan cuando sólo son necesarias en ocasiones.

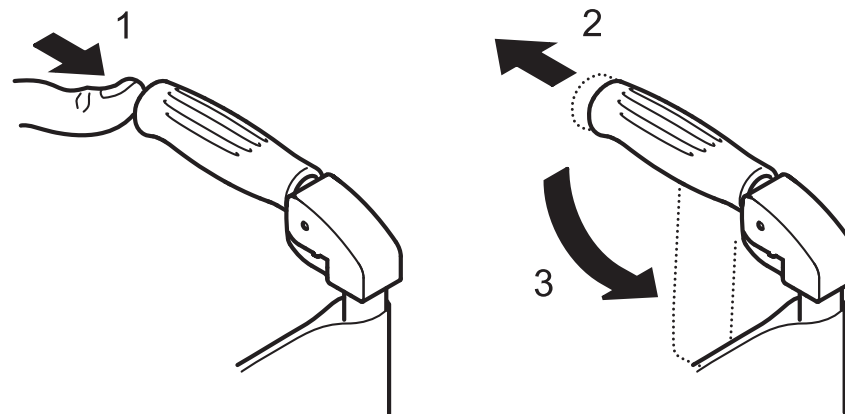

1. Para abatir las empuñaduras, sujete la silla de ruedas con una mano. Agarre con la otra mano la empuñadura y pulse con el dedo pulgar el botón de desbloqueo hasta que quede oculto bajo el plástico. (1)
2. Al mismo tiempo desplace la empuñadura hacia atrás (2) y abátala hacia abajo (3).
3. Para subir las empuñaduras, colóquelas en posición horizontal hasta que encajen.




¡IMPORTANTE!

- Asegúrese de que las empuñaduras encajan para que al mover la silla de ruedas no se abatan accidentalmente.


Empuñaduras traseras regulables en altura (opcional)

Las empuñaduras con regulación continua en altura permiten a cualquier acompañante empujar la silla en una posición cómoda.

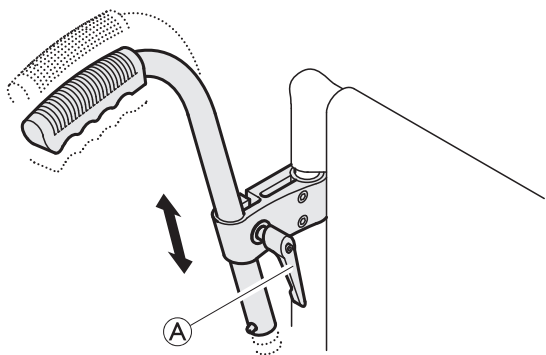

1. Para ajustar la altura de las empuñaduras, suelte el tornillo de fijación A, desplace el mango a la posición deseada y vuelva a apretar el tornillo.

3.6 Reposabrazos con regulación continua en altura (opcional)

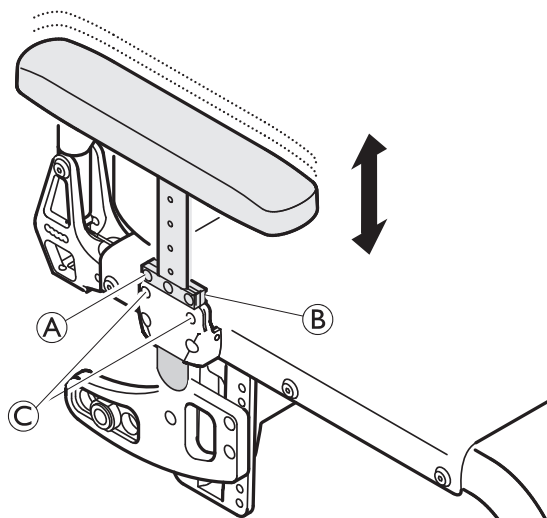

Retirada

1. Extraiga del soporte el reposabrazos por el acolchado del brazo.
2. Para ajustar la resistencia con que el reposabrazos se podrá extraer del soporte, deje los tornillos C más o menos flojos.

Colocación

1. Coloque el reposabrazos en el soporte.

Ajuste de la altura

1. Suelte los tornillos B en la placa de soporte A.
2. Suba o baje el apoyabrazos hasta la altura deseada.
3. Fije los tornillos B.
4. Realice los ajustes a ambos lados.

3.7 Dispositivo antivuelco

El dispositivo antivuelco evita que la silla de ruedas pueda volcar hacia atrás.



¡ADVERTENCIA!

Peligro de caída

Un dispositivo antivuelco incorrectamente ajustado o que no funcione pueden provocar caídas.

- Compruebe su funcionamiento antes de cada uso y, dado el caso, haga que un distribuidor especializado lo instale o reajuste.




¡ADVERTENCIA!

Peligro de caída

Cuando se utilice en terrenos irregulares o inestables, el dispositivo antivuelco podría hundirse en los baches o directamente en el suelo; en estos casos, se reducirá o eliminará su función de seguridad.

- Utilice el dispositivo antivuelco solamente en terrenos llanos y firmes.

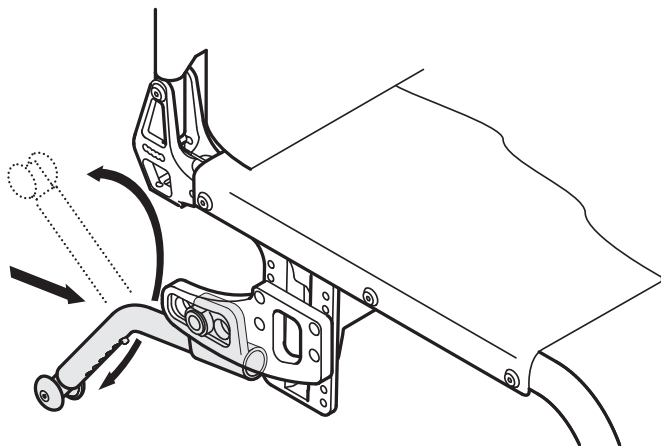

Activación del dispositivo antivuelco

1. Empuje el dispositivo antivuelco hacia la parte frontal contra el muelle y gírelo 180° hasta que encaje en la posición inferior.



¡ADVERTENCIA!

Peligro de vuelco

Al pasar por un escalón o un bordillo, el dispositivo antivuelco activado puede quedar suspendido.
– Desactive siempre el dispositivo antivuelco antes de pasar sobre un escalón o bordillo.

Desactivación del dispositivo antivuelco

1. Empuje el dispositivo antivuelco hacia la parte frontal contra el muelle y gírelo 180° hasta que encaje en la posición superior.

Ajuste de la altura

1. Presione el pasador elástico del dispositivo antivuelco y deslice la pieza interna hasta la posición deseada. Vuelva a encajar el pasador elástico en el orificio más cercano posible.

3.8 Cojín de asiento


Para garantizar una distribución óptima de la presión sobre la superficie de asiento se requiere un cojín de asiento adecuado.



Utilice un tejido base antideslizante o unas cintas de sujeción de Velcro® para evitar que el cojín del asiento se deslice.

4 Accesorios

4.1 Cinta de fijación

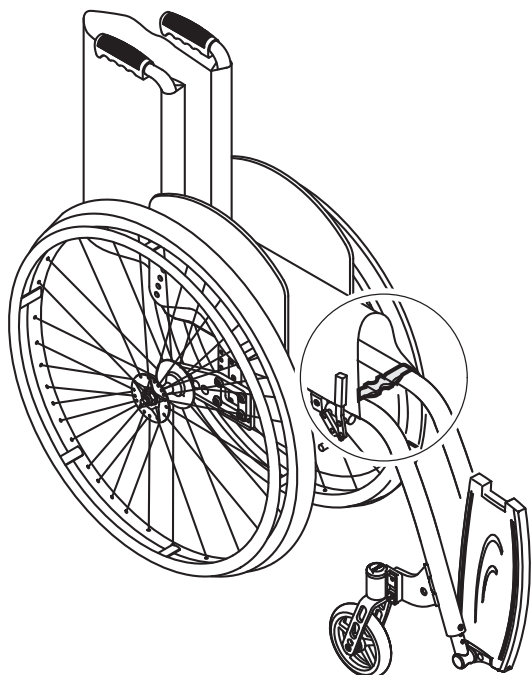


Con la cinta de fijación, la silla de ruedas se puede fijar en estado plegado. De esta forma no es posible desplegar la silla de ruedas de forma accidental (por ejemplo durante el transporte).

1. Suelte la base del asiento del cierre de broche (si lo hay) a ambos lados.
2. Pliegue la silla de ruedas (7.2 Plegar y desplegar la silla de ruedas, página 27) y abroche los dos lados de la cinta de fijación.

4.2 Cinturón pélvico

La silla de ruedas se puede ajustar con un cinturón pélvico que evitará que el usuario se deslice hacia delante o caiga de la silla de ruedas.

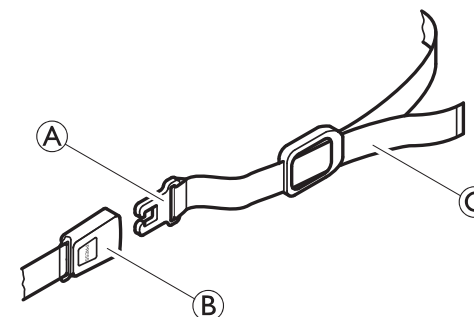

¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones graves como consecuencia de estrangulamiento

- Asegúrese de sentarse con la espalda completamente apoyada en el asiento y con la pelvis en una posición lo más vertical y simétricamente posible; no se recline hacia un lado ni se incline hacia atrás.
- Coloque el cinturón de seguridad de forma que los huesos de la cadera queden por encima del cinturón.
- Ajuste la longitud con las hebillas de forma que haya suficiente espacio para deslizar una mano entre el cuerpo del usuario y el cinturón. Se recomienda que la hebilla se mantenga en una posición central; es decir, realice ajustes en cada lado.
- Asegúrese de que el cinturón no resbale y de que la hebilla no se deshaga. Si es necesario, vuelva a ajustar el cinturón pélvico, → distribuidor autorizado.
- Se recomienda comprobar y cambiar estos ajustes cada vez que se utilice el cinturón.

Ajuste del cinturón pélvico

1. Quite la funda del respaldo y coloque el sistema de sujeción de Velcro® en el respaldo a la altura deseada. Asegúrese de que el sistema de sujeción se encuentre en la parte delantera.

Apertura del cinturón pélvico

1. Presione el botón PRESS y retire la pieza de cierre ① de la hebilla ②. El cinturón pélvico se abre.

Cierre del cinturón pélvico

1. Inserte la pieza de cierre ① en la hebilla ②.
2. Apriete el cinturón ③ hasta estar sentado de forma segura en su silla de ruedas.

4.3 Bomba de inflar

La bomba de inflar se suministra con un racor de válvula universal.

1. Levante la tapa antipolvo del racor de válvula.
2. Presione el racor en la válvula abierta de la rueda e ínflala con la bomba.

4.4 Bolsa de transporte para la silla de ruedas (opcional)

 Para el transporte seguro y limpio de la silla de ruedas plegada, ésta se puede guardar en una bolsa de transporte.

4.5 Iluminación pasiva

Puede fijar reflectores a las ruedas traseras.


4.6 Ruedas transit

Si la silla de ruedas resulta demasiado ancha para ciertas situaciones (p. ej., tren/avión, pasillos o puertas estrechos), es posible utilizar las ruedas transit.



¡ADVERTENCIA!

Al utilizar las ruedas transit, los frenos de estacionamiento dejan de funcionar y ya no podrá controlar la silla de ruedas con los aros propulsores.

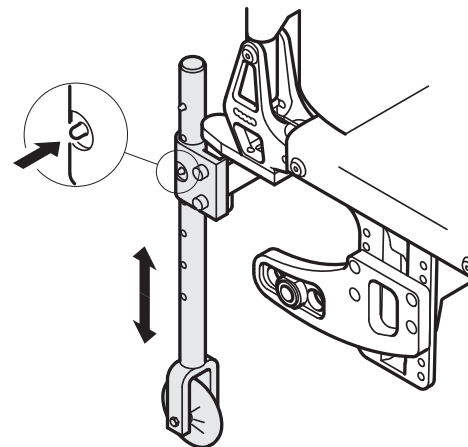

Cambio a las ruedas transit

1. Coloque las ruedas transit en la posición de uso. Para ello, empuje hacia dentro el pasador ① hasta que se pueda tirar del tubo hacia abajo.
2. Empuje hacia dentro el segundo pasador.
3. Siga tirando hacia abajo del tubo hasta que el pasador encaje en el orificio.
4. Sitúese con la silla de ruedas junto a un objeto estable (marco de puerta, mesa pesada) al que pueda sujetarse sin problemas y agárrese fuertemente con una mano.
5. Inclíne la silla de ruedas hasta que la rueda trasera del lado contrario se levante del suelo.



La distancia de las ruedas transit bajadas al suelo antes de extraer las ruedas traseras no debe superar 2 cm.

6. Retire la rueda trasera, → 7.3 Montaje y desmontaje de las ruedas traseras, página 28.
7. Repita el proceso del otro lado.

Cambio de las ruedas transit a las ruedas traseras

1. Sitúese con la silla de ruedas junto a un objeto estable al que pueda sujetarse sin problemas y agárrese fuertemente con una mano.
2. Incline la silla de ruedas hasta que la rueda temporal del lado contrario se levante ligeramente del suelo.
3. Vuelva a colocar la rueda trasera con el eje de desmontaje rápido, → 7.3 Montaje y desmontaje de las ruedas traseras, página 28.
4. Vuelva a colocar las ruedas transit en la posición de inactividad.
5. Repita el proceso del otro lado.

4.7 Pisapié


El pisapié permite al acompañante inclinar ligeramente la silla de ruedas, p. ej., para subir un escalón.



¡ADVERTENCIA!

Peligro de caída


- El dispositivo basculante no debe rebasar el diámetro exterior de la rueda trasera.

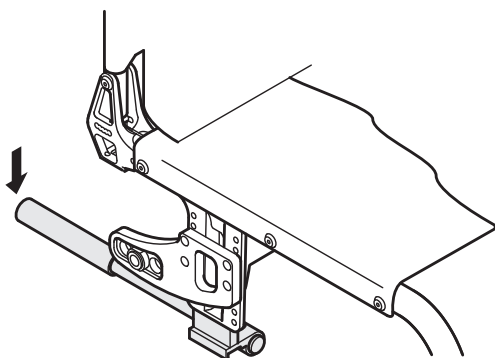

1. Sujete con firmeza la silla por las empuñaduras.
2. Pise con un pie el pisapié y mantenga la silla de ruedas en posición inclinada hasta haber superado el obstáculo.

1512599-B

4.8 Soporte para bastones

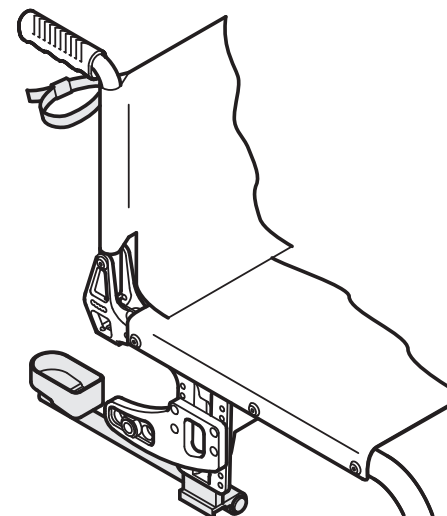

¡ADVERTENCIA!

Peligro de caída

- El bastón no debe sobresalir más allá del diámetro de la rueda trasera.

1. Coloque el bastón en el soporte para bastones.
2. Fije el bastón al puño utilizando la cincha de velcro.

5 Instalación

5.1 Indicaciones de seguridad



¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de lesiones

- Antes de usar la silla de ruedas, compruebe el estado general de la misma y las funciones más importantes, → 8.2 Plan de mantenimiento, página 30.

Su distribuidor especializado se encargará de dejar la silla de ruedas lista para el uso. Éste le explicará las funciones más importantes y garantizará que la silla de ruedas esté adaptada a sus requisitos y necesidades.

Si recibe la silla plegada, lea por favor el capítulo 7.2 Plegar y desplegar la silla de ruedas, página 27.

6 Conducción de la silla de ruedas

6.1 Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA!
Peligro de accidente

Una presión desigual de los neumáticos puede influir en gran medida en el comportamiento de conducción.

- Compruebe la presión de los neumáticos antes de cada desplazamiento.



¡PRECAUCIÓN!
Peligro de aplastamiento

Entre la rueda trasera y el guardabarros o el protector de ropa, la distancia puede ser tan pequeña que es posible pillarse los dedos.

- Procure accionar su silla de ruedas únicamente mediante los aros propulsores.



¡PRECAUCIÓN!
Peligro de aplastamiento

Entre la rueda trasera y el freno de estacionamiento, la distancia puede ser tan pequeña que es posible pillarse los dedos.

- Procure accionar su silla de ruedas únicamente mediante los aros propulsores.



¡ADVERTENCIA!
Peligro de caída por frenado brusco

Si acciona los frenos de estacionamiento durante la marcha, no se podrá controlar el sentido de la marcha y la silla de ruedas puede frenar de forma brusca, lo que puede provocar choques o caídas.

- No accione nunca los frenos de estacionamiento durante la marcha.



¡ADVERTENCIA!
Riesgo de caída de la silla de ruedas

Si el asistente desacelera rápidamente la silla de ruedas al tirar de las asas de empuje, es posible que el usuario caiga de la silla de ruedas.

- En caso de que exista un cinturón pélvico, colóquelo siempre.
- Asegúrese de que el asistente haya recibido formación individual en relación con la transferencia de sillas de ruedas ocupadas.



¡PRECAUCIÓN!
Riesgo de quemaduras en las manos

Los aros propulsores (en especial los MaxGrepp y Supergripp) pueden calentarse si frena durante un tiempo prolongado y podría sufrir quemaduras en las palmas de las manos.

- Lleve guantes apropiados.


6.2 Frenado durante la marcha

Frenado durante la marcha mediante transmisión de la fuerza a los aros propulsores con las manos.

1. Sujete los aros propulsores y ejerza presión de forma constante con ambas manos hasta que la silla de ruedas se detenga por completo.

Frenado por parte de un acompañante

Con el freno de acompañante (freno de tambor), el acompañante puede frenar la silla de ruedas durante la marcha. El freno de acompañante también se puede fijar.

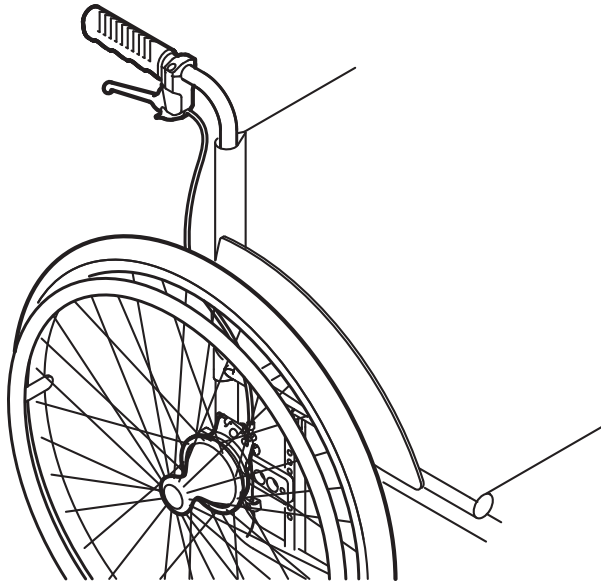

1. Para frenar, tire de la palanca de freno de la empuñadura.
2. Para bloquear, apriete con firmeza la palanca de mano hasta que la palanca de seguridad encaje.
3. Para soltar, tire de la palanca de mano y suelte la palanca de seguridad ubicada en la parte inferior de la palanca de mano.

6.3 Subida y bajada de la silla de ruedas



¡ADVERTENCIA! Peligro de caída

Al realizar transferencias existe un elevado peligro de caída.

- Suba y baje de la silla de ruedas sin ayuda únicamente si se encuentra en condiciones físicas para hacerlo.



¡ADVERTENCIA! Peligro de caída

La silla de ruedas puede volcar hacia delante al colocarse de pie sobre el reposapiés.

- No se ponga nunca de pie sobre el reposapiés al subir y bajar.



¡PRECAUCIÓN!

Si los frenos se sueltan o se rompen, la silla de ruedas puede desplazarse accidentalmente de forma incontrolada.

- No se apoye nunca en los frenos al subir y bajar.



¡IMPORTANTE!

El guardabarros o el reposabrazos pueden romperse.

- No se siente nunca sobre el guardabarros o el reposabrazos al subir y bajar.

1. Accione los frenos de estacionamiento.
2. Ponga los pies en el suelo.
3. Sujétese a la silla de ruedas y, si es necesario, también a un objeto firme de su alrededor.
4. Muévase con lentitud hacia la silla.

6.4 Impulsión y conducción de la silla de ruedas

La impulsión y conducción de la silla de ruedas se efectúa mediante los aros propulsores.

Antes de conducir sin acompañante, debe encontrar el punto de basculamiento de su silla de ruedas.



¡ADVERTENCIA!

Peligro de vuelco

La silla de ruedas puede volcar hacia atrás si no hay ningún dispositivo antivuelco montado. Al buscar el punto de basculamiento debe haber un acompañante justo detrás de la silla de ruedas para cogerla en caso de bascule en exceso.

- Para evitar que vuelque, monte un dispositivo antivuelco.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de volcado

La silla de ruedas puede volcar hacia delante.

- Durante el montaje de la silla de ruedas, pruebe el comportamiento en cuanto al volcado hacia delante se refiere y realice los ajustes necesarios conforme al estilo de conducción.




¡PRECAUCIÓN!

Las cargas pesadas colgadas en el respaldo pueden influir en el punto de gravedad de la silla de ruedas.

- Adapte su comportamiento de conducción de forma correspondiente.

Hallar el punto de basculamiento

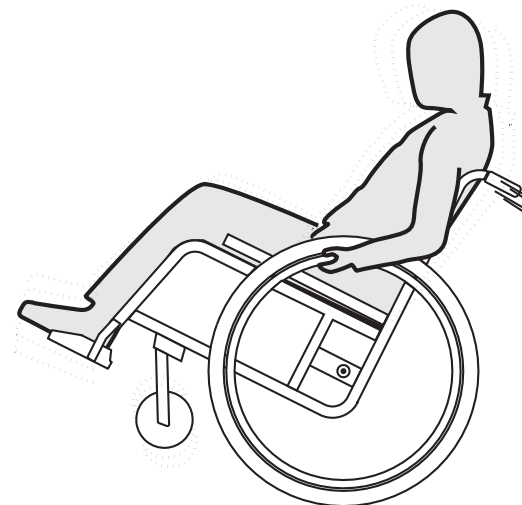

1. Suelte el freno.
2. Desplácese un poco hacia delante con la silla de ruedas, agarre ambos aros de propulsión y prosiga el desplazamiento con un ligero impulso.
3. Mediante el desplazamiento del peso y el contraviraje en los aros de propulsión averiguará el punto de basculamiento.

6.5 Desplazamiento con escalones y descansillos



¡ADVERTENCIA!

Peligro de caída

Al bajar escalones puede perder el equilibrio y volcar con su silla de ruedas.

- Baje siempre despacio y con cuidado por escalones como bordillos y descansillos.
- No baje nunca por escalones con una altura superior a 25 cm.



¡PRECAUCIÓN!

El dispositivo antivuelco impide que la silla de ruedas bascule hacia atrás.

- Desactive el dispositivo antivuelco antes de marchar por escalones o descansillos.

Con acompañante



Bajada de un escalón


1. Lleve la silla de ruedas justo hasta el borde y agarre los aros propulsores.
2. El acompañante sujeta las dos empuñaduras, coloca un pie en el dispositivo basculante (si está montado) e inclina la silla de ruedas hacia atrás de manera que las ruedas delanteras se eleven del suelo.
3. El acompañante mantiene la silla de ruedas en esta posición, la desplaza con cuidado hacia abajo del escalón e inclina la silla de ruedas hacia delante hasta que las ruedas delanteras vuelvan a tocar el suelo.

Subida de un escalón**¡ADVERTENCIA!****Riesgo de lesiones graves**

Subir escalones y bordillos puede provocar que los frenos del respaldo de la silla de ruedas fallen antes de lo previsto. El usuario podría caer de la silla de ruedas.

- Utilice siempre un pisapié cuando ascienda escalones o bordillos.

1. Mueva la silla de ruedas marcha atrás hasta que las ruedas traseras queden en el borde.
2. El acompañante inclina la silla de ruedas con las dos empuñaduras hasta que las ruedas delanteras se eleven del suelo y desplaza las ruedas traseras por encima del borde hasta que las ruedas delanteras también se puedan bajar.

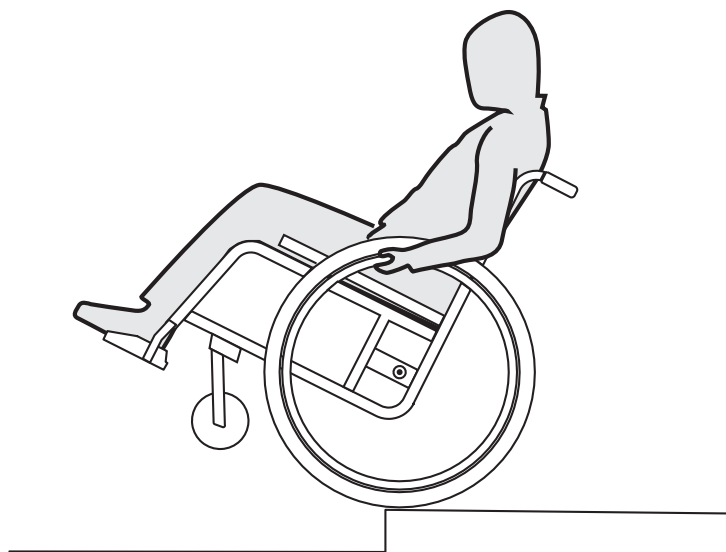Sin acompañante**¡ADVERTENCIA!****Peligro de vuelco**

Si baja un escalón sin acompañante, puede bascular hacia atrás en exceso si no domina su silla de ruedas.

- Aprenda primero cómo bajar un escalón con un acompañante.
- Aprenda a balancearse sobre las ruedas traseras, → 6.4 Impulsión y conducción de la silla de ruedas, página 21.

Bajada de un escalón

1. Lleve la silla de ruedas justo hasta el borde, eleve las ruedas delanteras y mantenga el equilibrio.
2. Ahora, desplace lentamente las ruedas traseras por encima del borde. Al hacerlo, sujete con firmeza los aros propulsores con las manos hasta que las ruedas delanteras vuelvan a tocar el suelo.

6.6 Bajar escaleras



¡ADVERTENCIA! **Peligro de caída**

Al bajar escaleras puede perder el equilibrio y volcar con su silla de ruedas.

- Baje escaleras de más de un escalón únicamente en compañía de 2 personas.



1. Las escaleras se pueden sortear tomando como se ha descrito anteriormente un escalón tras otro. Para ello, el primer acompañante se sitúa tras la silla de ruedas y la sujeta por las empuñaduras. El segundo acompañante sujeta una parte fija del chasis delantero y de esta forma asegura la silla de ruedas por delante.

6.7 Conducción sobre rampas y pendientes



¡ADVERTENCIA! **Peligro por marcha incontrolada**

En pendientes ascendentes o descendentes, su silla de ruedas puede volcar hacia atrás, hacia los lados o hacia delante.

- En pendientes largas, hágalo únicamente con un acompañante tras la silla de ruedas.
- Evite la inclinación lateral.
- Evite las pendientes de más de 7°.
- Evite los cambios de dirección bruscos en pendientes.




¡PRECAUCIÓN!

Su silla de ruedas también puede desplazarse involuntariamente sobre un terreno accidentado si no la controla mediante los aros propulsores.

- Accione los frenos de estacionamiento cuando se detenga sobre un terreno accidentado con su silla de ruedas.

Sentido ascendente


Para conducir en sentido ascendente, debe impulsarse, mantener el impulso y, a la vez, controlar la dirección.

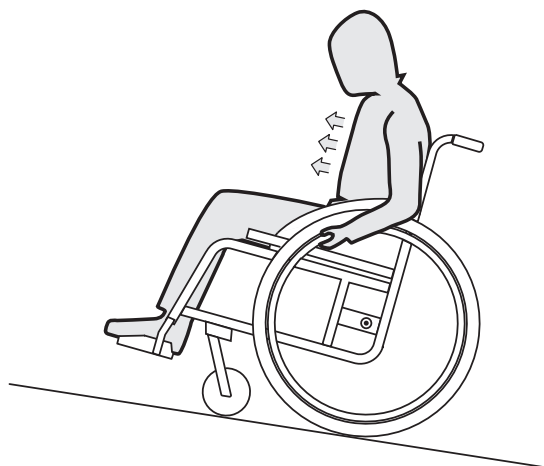

1. Incline el torso hacia delante e impulse la silla de ruedas empujando los dos aros propulsores con rapidez y fuerza.

Sentido descendente

Al conducir en sentido descendente es importante controlar la dirección y sobre todo la velocidad.

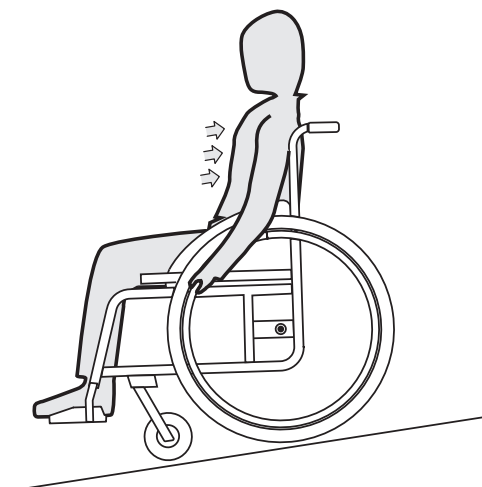

1. Reclínesse y deje que los aros propulsores se deslicen por las manos de forma cuidadosa. Debería poder parar la silla de ruedas en cualquier momento deteniendo los aros propulsores.



¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de quemaduras en las manos

Los aros propulsores (en especial los MaxGrepp y Supergripp) pueden calentarse si frena durante un tiempo prolongado y podría sufrir quemaduras en las palmas de las manos.

– Lleve guantes apropiados.

6.8 Estabilidad y equilibrio al estar sentado

Algunas actividades y acciones cotidianas requieren inclinarse hacia fuera de la silla de ruedas, hacia delante, hacia los lados o hacia atrás. Esto tiene una gran influencia en la estabilidad de la silla de ruedas.

Para poder mantener el equilibrio en todo momento, tenga en cuenta lo siguiente:

Inclinación hacia delante




¡ADVERTENCIA!

Peligro por vuelco hacia fuera

Si se inclina hacia delante por fuera de la silla de ruedas puede caerse.

- No se incline nunca demasiado hacia delante ni se deslice en su asiento para alcanzar un objeto.
- No se incline hacia abajo entre las rodillas para levantar algo del suelo.

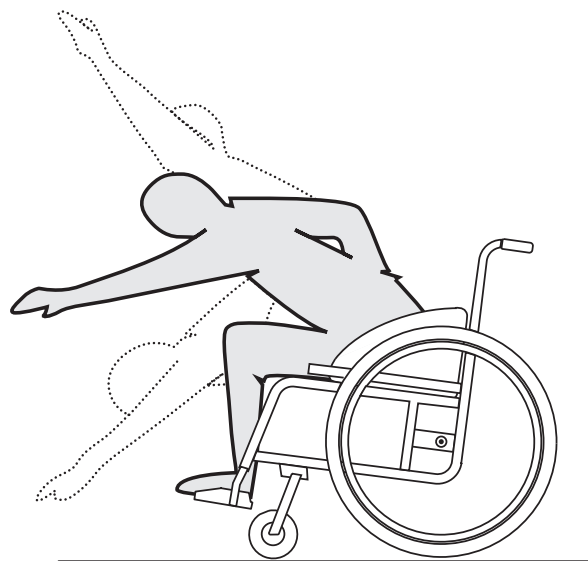

1. Oriente las ruedas delanteras hacia delante. (Para ello, mueva su silla un poco hacia delante y retroceda a continuación.)
2. Fije los dos frenos de estacionamiento.
3. Inclínese hacia delante sólo hasta una posición en la que su torso quede sobre las ruedas delanteras.

Extensión de los brazos hacia atrás para coger objetos




¡ADVERTENCIA!

Peligro por vuelco hacia fuera

Si se inclina demasiado hacia atrás, puede volcar junto con la silla de ruedas.

- No se incline más allá del respaldo.
- Utilice un dispositivo antivuelco.

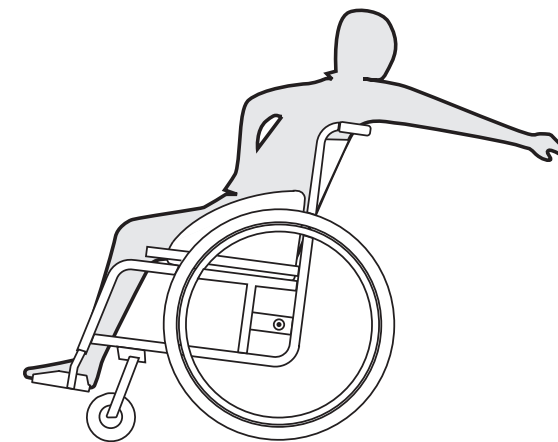

1. Oriente las ruedas delanteras hacia delante. (Para ello, mueva su silla un poco hacia delante y retroceda a continuación.)
2. Accione los frenos de estacionamiento.
3. Extienda el brazo hacia atrás únicamente hasta donde pueda sin cambiar la posición de asiento.

7 Transporte

7.1 Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones por transporte sin seguridad

Su silla de ruedas no es apropiada para el transporte de personas en vehículos. En caso de accidente, puede sufrir lesiones considerables.

- Durante el transporte, no se siente en la silla de ruedas, sino en un asiento seguro.



¡ADVERTENCIA!

Peligro de lesiones si la silla de ruedas no se fija de forma adecuada

En caso de accidente, frenazo, etc., las piezas móviles de la silla de ruedas pueden provocar lesiones graves.

- Quite siempre las ruedas traseras cuando transporte la silla de ruedas.
- Fije con firmeza todos los componentes de la silla de ruedas en los medios de transporte para evitar que se suelten durante el trayecto.




¡IMPORTANTE!

El desgaste excesivo del material podría afectar a la estabilidad de piezas de soporte.

- No mueva su silla de ruedas con las ruedas desmontadas sobre superficies abrasivas (p. ej. arrastre del chasis sobre el asfalto).


7.2 Plegar y desplegar la silla de ruedas

Plegado de la silla de ruedas

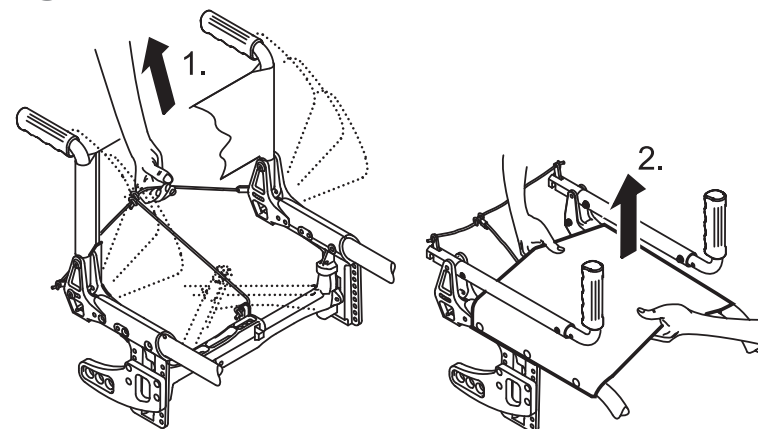

1. Retire el cojín de asiento
2. If fitted, release the backrest stabilization bar by pressing the spring pin and swinging the bar downwards, → 3.4 Barra estabilizadora para el respaldo (opcional), página 11.
3. Tire del cordón del respaldo hacia atrás (1.). Las tijeras del mecanismo de plegado de debajo del asiento se pliegan y el respaldo se abate hacia delante.
4. Tire con ambas manos del tapizado de asiento y respaldo hacia arriba (2.). La silla se pliega completamente.

Desplegar la silla

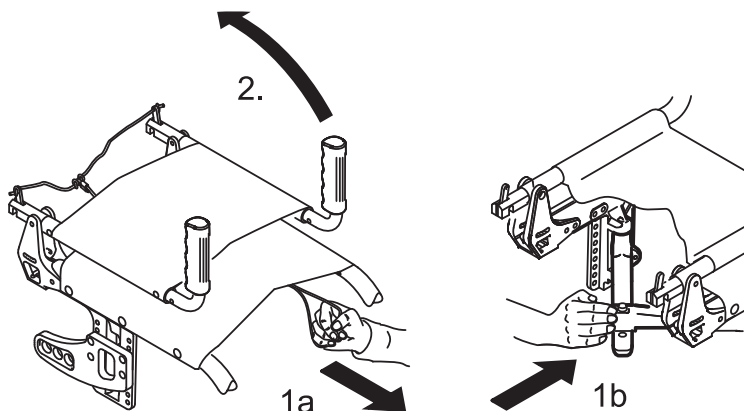

1. Tire del cordón de la parte delantera del tapizado de asiento hasta que las tijeras queden completamente desplegadas (1a).

o



¡PRECAUCIÓN!

Risk of getting fingers caught

There is a risk of getting your fingers caught between the parts of the shears.

– Therefore never clasp the shears with your fingers.

1. Presione la parte inferior de la tijera hacia delante con la palma de la mano hasta que el pasador quede atrapado en su lugar (1b).
2. Sujete los puños y tire de los mismos hacia atrás hasta que los pernos laterales queden anclados en los soportes del respaldo (2).
3. If fitted, replace the backrest stabilization bar by swinging it upwards and locating the spring pin in its hole, 3.4 Barra estabilizadora para el respaldo (opcional), página 11.

7.3 Montaje y desmontaje de las ruedas traseras




¡ADVERTENCIA!

Peligro de caída

Si el eje de desmontaje de la rueda trasera no está encajado por completo, la rueda se puede soltar durante la marcha, lo que puede provocar una caída.

– Tras cada montaje de las ruedas, asegúrese de que los ejes de desmontaje están completamente encajados.

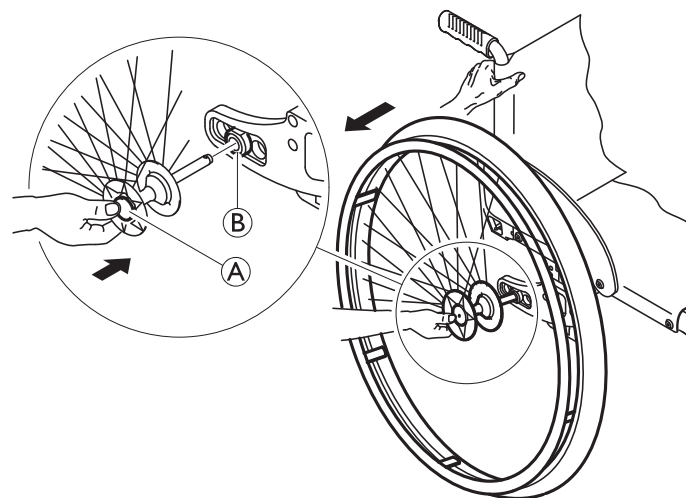

Retirada de las ruedas traseras

1. Suelte los frenos.
2. Mantenga la silla de ruedas en posición vertical con una mano.
3. Con la otra mano, sujete la rueda por los radios de alrededor del cubo.
4. Presione con el pulgar el botón del eje de desmontaje rápido (A). Manténgalo presionado y saque la rueda del manguito adaptador (B).

Colocación de las ruedas traseras

1. Suelte los frenos.
2. Mantenga la silla de ruedas en posición vertical con una mano.
3. Con la otra mano, sujete la rueda por los radios de alrededor del cubo.
4. Presione con el pulgar el botón del eje de desmontaje rápido.
5. Introduzca ahora el eje en el manguito adaptador ⑧ hasta el tope.
6. Suelte el botón de eje de desmontaje rápido y asegúrese de que la rueda queda fijada.

8 Mantenimiento

8.1 Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA!

Algunos materiales experimentan un envejecimiento natural. Esto puede provocar daños en piezas de la silla de ruedas.

- Tras tiempos de parada prolongados y, en cualquier caso, al menos una vez al año, la silla de ruedas debe ser revisada por un distribuidor especializado.



Su distribuidor especializado de *küschall*® le proporcionará ayuda para llevar a cabo las tareas de mantenimiento regulares. Para encontrar un distribuidor especializado cerca de su domicilio, diríjase a la representación de *küschall*® de su país (al final de este documento).

8.2 Plan de mantenimiento

Para garantizar la seguridad y fiabilidad necesarias, realice regularmente las siguientes tareas de mantenimiento o encomiéndelas a otra persona.

	Semanal	Mensual	Anual
Comprobación de la presión del aire de los neumáticos	x		
Comprobación de la posición correcta de las ruedas traseras	x		
Comprobación del cinturón pélvico	x		

	Semanal	Mensual	Anual
Control visual		x	
Limpieza de las ruedas delanteras		x	
Comprobación de las conexiones roscadas		x	
Comprobación de los radios		x	
Revisión de los frenos de estacionamiento		x	
Revisión de la silla de ruedas por un distribuidor especializado			x

Comprobación de la presión del aire de los neumáticos

1. Mida la presión de los neumáticos,
→ 11.3 Neumáticos, página 38.
2. Infle los neumáticos con la presión requerida.
3. Compruebe también el perfil de los neumáticos.
4. Si es necesario, cambie los neumáticos.

Comprobación de la posición correcta de las ruedas traseras

1. Tire de la rueda trasera para comprobar la posición del eje de desmontaje rápido. La rueda no debe poder quitarse.
2. Si las ruedas traseras no encajan correctamente, retire la posible suciedad o los residuos incrustados. Si el problema persiste, solicite a un distribuidor especializado que vuelva a ajustar los ejes de desmontaje rápido.

Comprobación del cinturón

1. Compruebe que el cinturón pélvico esté ajustado de manera idónea.



¡IMPORTANTE!

- Un representante autorizado debe ajustar los cinturones pélvicos sueltos.
- Un representante autorizado debe cambiar los cinturones pélvicos estropeados.

Control visual

1. Inspeccione su silla de ruedas para detectar piezas flojas, grietas u otros defectos.
2. Si algo le llama la atención, solicite una revisión exhaustiva a un distribuidor especializado.

Limpieza de las ruedas delanteras

1. Compruebe si las ruedas delanteras pueden girar libremente.
2. Elimine la suciedad y los pelos los cojinetes de las ruedas delanteras.

Comprobación de las conexiones roscadas

Los tornillos se pueden aflojar por el uso continuo.

1. Compruebe si los tornillos están bien sujetos (el reposapiés, la funda del asiento, las piezas laterales, respaldo, chasis, módulo del asiento).
2. Ajuste todos los pernos sueltos con el par adecuado. Por lo tanto, consulte el manual de mantenimiento *küschall Champion*, disponible en Internet en www.kueschall.com.



¡IMPORTANTE!

Las tuercas y tornillos de seguridad pierden su efecto al aflojarlas y apretarlas repetidamente.
– La sustitución de las tuercas y tornillos de seguridad debe realizarse por un distribuidor especializado.

Comprobación del esfuerzo de tracción de los radios

Los radios no deben estar aflojados ni deformados.

1. Solicite a un distribuidor especializado que apriete los radios aflojados.
2. Solicite a un distribuidor especializado que sustituya los radios rotos.

Comprobación de los frenos de estacionamiento

1. Compruebe que los frenos de estacionamiento estén bien colocados. El freno está bien ajustado si, cuando el freno está accionado, la zapata del freno penetra algunos milímetros en los neumáticos.
2. Si determina que esto no se cumple, solicite a un distribuidor especializado que ajuste los frenos.



¡IMPORTANTE!

Tras la sustitución o un cambio de posición de las ruedas traseras, los frenos de estacionamiento se deben ajustar de nuevo.

Comprobaciones tras una colisión o golpe fuertes



¡IMPORTANTE!

Como consecuencia de una colisión violenta o un golpe fuerte, pueden producirse daños imperceptibles en la silla de ruedas.

– Después de una colisión violenta o un golpe fuerte es imprescindible que la silla de ruedas sea inspeccionada por un representante autorizado.

1. Retire la rueda trasera y deje salir el aire restante de la cámara.
2. Eleve el flanco del neumático de la llanta. Utilice para ello un levantaneumáticos para bicicletas y no emplee objetos puntiagudos como destornilladores para no dañar la cámara de aire.
3. Retire la cámara de aire del neumático.
4. Repare la cámara de aire con parches para bicicleta o, si es necesario, sustituya la cámara de aire.
5. Infle un poco la cámara de aire hasta que adquiera una forma redonda.
6. Inserte la válvula en el orificio de válvula de la llanta y coloque la cámara de aire en los neumáticos (la cámara no debe presentar dobleces en ninguna zona).
7. Eleve el flanco del neumático por la llanta. Comience por la zona de la válvula utilizando un levantaneumáticos para bicicletas. Al hacerlo, compruebe que la cámara de aire no queda atrapada entre el neumático y la llanta por ninguna zona.
8. Infle el neumático hasta la presión de servicio máxima. Asegúrese de que, efectivamente, el neumático no sigue perdiendo aire.

Piezas de repuesto



Puede adquirir todas las piezas de repuesto por medio de un distribuidor especializado de *küschall*®. Encontrará una lista actualizada de las piezas de repuesto disponibles en la dirección de Internet www.kueschall.com.

8.3 Cuidado

Su silla de ruedas le dará un buen servicio durante años si realiza los cuidados necesarios con regularidad.



¡IMPORTANTE!

La arena y el agua del mar pueden dañar los rodamientos de bolas y las piezas de acero pueden oxidarse si la superficie está deteriorada.

– Exponga la silla de ruedas a la arena y el agua del mar sólo por poco tiempo y límpiela cada vez que vuelva de la playa.



¡IMPORTANTE!

– No frote con agentes abrasivos, no utilice agentes de limpieza agresivos ni limpiadores a alta presión.

1. Limpie los acolchados y las piezas metálicas con un paño suave húmedo.
2. Frote cuidadosamente la silla de ruedas para secarla tras conducirla con lluvia o después de ducharse.
3. Si la silla de ruedas está sucia, limpie la suciedad lo antes posible con un paño humedecido y a continuación frote con cuidado la silla de ruedas para secarla.

8.4 Desinfección

La desinfección por pulverización o frotamiento está admitida si se utilizan desinfectantes probados y homologados.



Encontrará una lista de los desinfectantes admitidos en el Instituto Robert Koch, en la dirección www.rki.de.

9 Solución de problemas

9.1 Indicaciones de seguridad

El uso diario, la realización de nuevos ajustes y las modificaciones en las exigencias de la silla de ruedas pueden provocar averías. La siguiente tabla muestra cómo se pueden detectar y solucionar las averías.



¡PRECAUCIÓN!

- Si detecta averías en su silla de ruedas, por ejemplo un cambio considerable del comportamiento de conducción, diríjase de inmediato a su distribuidor especializado.



IMPORTANTE!

- Algunas de las medidas indicadas debe ser realizadas por un distribuidor especializado autorizado. Éstas están correspondientemente identificadas. Le recomendamos encomendar la realización de *todos* los ajustes a un distribuidor especializado.

9.2 Detección y reparación de defectos

Avería	Posible causa	Medida
La silla de ruedas no marcha en línea recta	Presión del neumático incorrecta en una rueda trasera	Corregir la presión de los neumáticos, → 11.3 Neumáticos, página 38
	El tubo de la horquilla no esta montado en posición vertical	Monte el tubo de la horquilla en posición vertical, → Distribuidor especializado
	Las ruedas delanteras no están ajustadas a la misma altura	Coloque las ruedas delanteras de manera que están en contacto con el suelo al mismo tiempo, → Distribuidor especializado
	Uno o más radios rotos	Sustituir los radios defectuosos, → Distribuidor especializado
	Radios apretados de forma desigual	Apretar los radios demasiado aflojados, → Distribuidor especializado
	Cojinetes de ruedas delantera sucios o dañados	Limpiar o sustituir los cojinetes, → Distribuidor especializado
La silla de ruedas bascula demasiado poco hacia atrás	Las ruedas traseras están montadas demasiado adelantadas	Montar las ruedas traseras más atrasadas, → Distribuidor especializado
	Ángulo del respaldo demasiado grande	Reducir el ángulo del respaldo, → Distribuidor especializado
	Ángulo del asiento demasiado grande	Montar la placa adaptadora más baja en el soporte lateral, → Distribuidor especializado Elegir una horquilla delantera más pequeña, → Distribuidor especializado
Los frenos no engranan bien o lo hacen de forma asimétrica	Presión del neumático incorrecta en una o en ambas ruedas traseras	Corregir la presión de los neumáticos, → 11.3 Neumáticos, página 38
	Ajuste de los frenos incorrecto	Corregir el ajuste de los frenos, → Distribuidor especializado

Avería	Posible causa	Medida
La resistencia de la rueda es demasiado grande	Presión de los neumáticos demasiado escasa en las ruedas traseras	Corregir la presión de los neumáticos, → 11.3 Neumáticos, página 38
	Las ruedas traseras no están paralelas	Comprobar que las ruedas traseras están paralelas, → Distribuidor especializado
Las ruedas delanteras tiemblan durante la marcha rápida	Tensión demasiado escasa en el bloque de cojinetes de la rueda delantera	Apretar ligeramente las tuercas del eje del bloque de cojinetes, → Distribuidor especializado
La silla de ruedas se pliega con mucha dificultad	La funda del respaldo está demasiado apretada	Soltar un poco las cintas de velcro de la funda del respaldo, → 3.3 Respaldo, página 11
	El ajuste del mecanismo de plegado es demasiado duro	Ajuste el mecanismo de plegado, → Distribuidor especializado

10 Después del uso

10.1 Reutilización

La silla de ruedas es adecuada para la reutilización. Deben llevarse a cabo las siguientes medidas:

- Limpieza y desinfección según el capítulo 8.3 Cuidado, página 32 y el capítulo 8.4 Desinfección, página 32 de estas instrucciones.
- Inspección según el capítulo 8.2 Plan de mantenimiento, página 30 de estas instrucciones.
- Adaptación al usuario según la documentación de servicio (que puede adquirir en la representación de *küschall*® de su país, → al final de este documento).

10.2 Eliminación de desechos

Cuide su medioambiente y procure la correcta eliminación de su silla de ruedas. Para la eliminación de desechos se aplican las disposiciones legales nacionales y locales.




Para eliminar desechos correctamente, diríjase a su distribuidor especializado o pregunte por una empresa de eliminación de desechos local en la administración de su municipio o ciudad.

11 Datos técnicos

11.1 Dimensiones y peso

Todas las especificaciones en relación con la dimensión y el peso corresponden a un asiento con una anchura de 400 mm y una profundidad de 400 mm en la configuración más ligera de la silla de ruedas. La dimensión y el peso pueden cambiar en función de las distintas configuraciones.

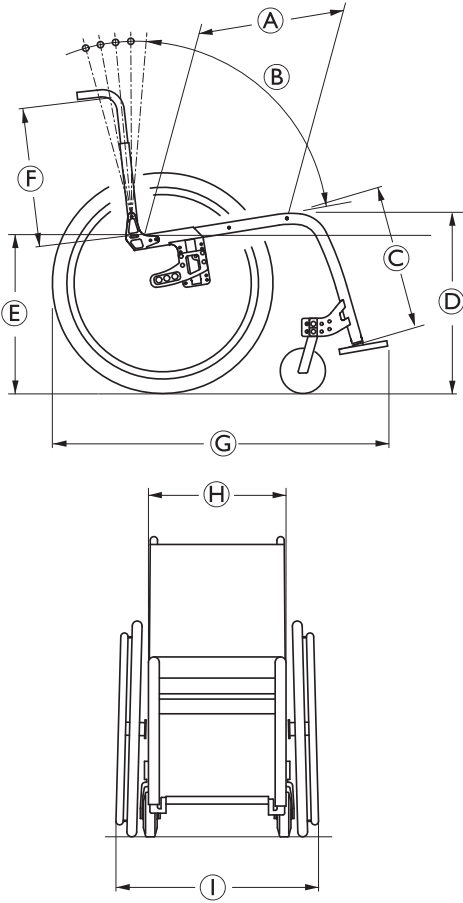

Ⓐ	Profundidad del asiento	340 - 460 mm, en incrementos de 20 mm
Ⓑ	Ángulo de respaldo	79°, 83,5°, 88°, 92,5°, 97°
Ⓒ	Longitud de pierna	220 - 500 mm, en incrementos de 10 mm
Ⓓ	Altura de asiento delantera	450 - 540 mm, en incrementos de 10 mm
Ⓔ	Altura de asiento trasera	390 - 490 mm, en incrementos de 10 mm
Ⓕ	Altura de respaldo	300 - 465 mm, en incrementos de 15 mm
Ⓖ	Longitud total	75°: aprox. 860 mm 90°: aprox. 810 mm
Ⓗ	Anchura de asiento	360 - 460 mm, en incrementos de 20 mm
Ⓘ	Anchura total	Anchura de asiento + 170 mm
	Anchura total, plegada	aprox. 300 mm
	Peso	aprox. 10,1 kg
	Peso sin ruedas traseras	aprox. 7,1 kg
	Peso máximo del usuario	120 kg
	Espacio para girar	920 - 1230 mm

11.2 Condiciones ambientales

No exponga la silla de ruedas a temperaturas inferiores a -20 °C o superiores a 40 °C.

11.3 Neumáticos

La presión del aire óptima depende del tipo de neumáticos:

Neumáticos	Presión del aire máx.		
Neumáticos de baja resistencia	7 bar	700 kPa	101 psi
Neumáticos perfilados (Marathon)	7,5 bar	750 kPa	108 psi
Neumáticos lisos (Speed run)	10 bar	1000 kPa	145 psi
Neumáticos Mountain bike	4 bar	400 kPa	58 psi
Neumáticos de caucho macizo	-	-	-

Ⓐ	Dirección del fabricante
Ⓑ	Denominación del producto
Ⓒ	Fecha de fabricación
Ⓓ	Indicación de observar el manual del usuario
Ⓔ	Peso máximo del usuario
Ⓕ	Indicación que esta silla de ruedas no es apropiada para el transporte de personas en vehículos
Ⓖ	Número de serie
Ⓗ	Advertencia de que esta es una silla de ruedas activa y puede volcar

11.4 Placa de identificación

La placa de identificación se encuentra en el bastidor de su silla de ruedas y presenta la siguiente información:

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ Ⓓ

Ⓔ Ⓕ

Ⓖ

Ⓗ

Küschall AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
SWITZERLAND


www.kuschall.com

KÜSCHALL CHAMPION 2008 SB 420 mm

 15/10/2008

 Read User Manual

 120 kg



SN 01234567890




4 028698 113099


Made in Switzerland

 Active wheelchair, tipping possible !

Nota

Küschall® distributors

España:

Invacare SA,
c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà, E-17460 Celrà (Girona)
Tel: (34) (0)972 49 32 00, Fax: (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com



Küschall AG,
Benkenstrasse 260,
CH-4108 Witterswil,
www.kuschall.com

1512599-B 2012-09-06



 **küschall®**
designed for life